

Reduce *instantáneamente* el dolor y la ansiedad por las agujas e inyecciones.



Efecto Inmediato



Diseñado por un médico pediatra



Libre de látex y ftalatos



Registrado con la FDA

La ciencia detrás de ShotBlocker®




Su desarrollo se basa en la Teoría de “Gate Control” para suprimir el dolor. Utiliza una serie de puntas romas especialmente diseñadas, presionando alrededor del sitio de inyección, para saturar momentáneamente las señales sensoriales.



ShotBlocker®

Las inyecciones ya no tienen por qué doler!

Reduce instantáneamente el dolor y la ansiedad por las agujas e inyecciones.

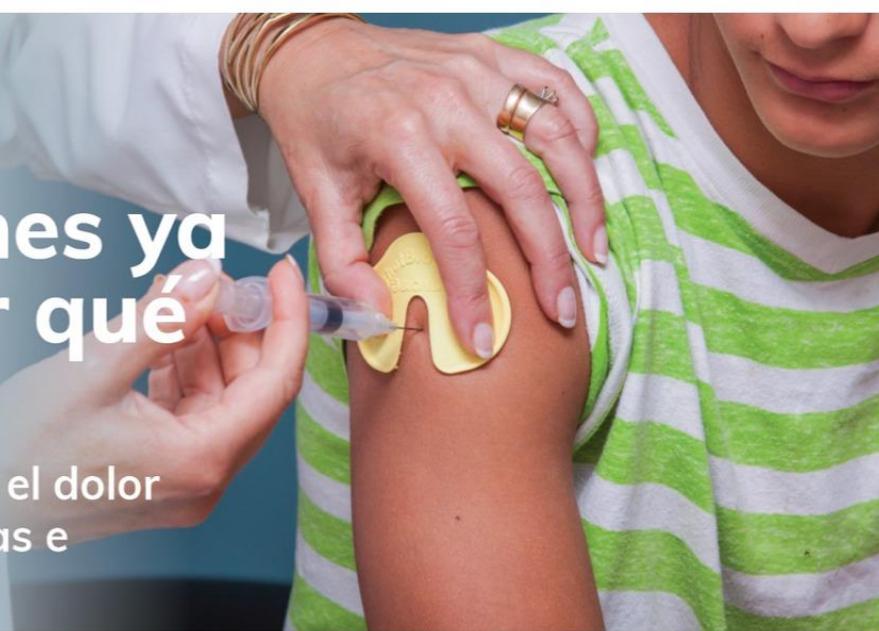

¿Para quién es?

ShotBlocker esta diseñado tanto para niños como adultos, para todo tipo de vacunas e inyecciones, intramusculares y subcutáneas, en brazos, caderas, muslos y otras partes.

Para usar en inyecciones de:

- Insulina
- Inmunización (Vacunas)
- Tratamiento Estéticos
- Alergias
- Fertilidad
- Hormonas y más!



Efecto Inmediato



No invasivo




Libre de fármacos



Precio económico

ShotBlocker®

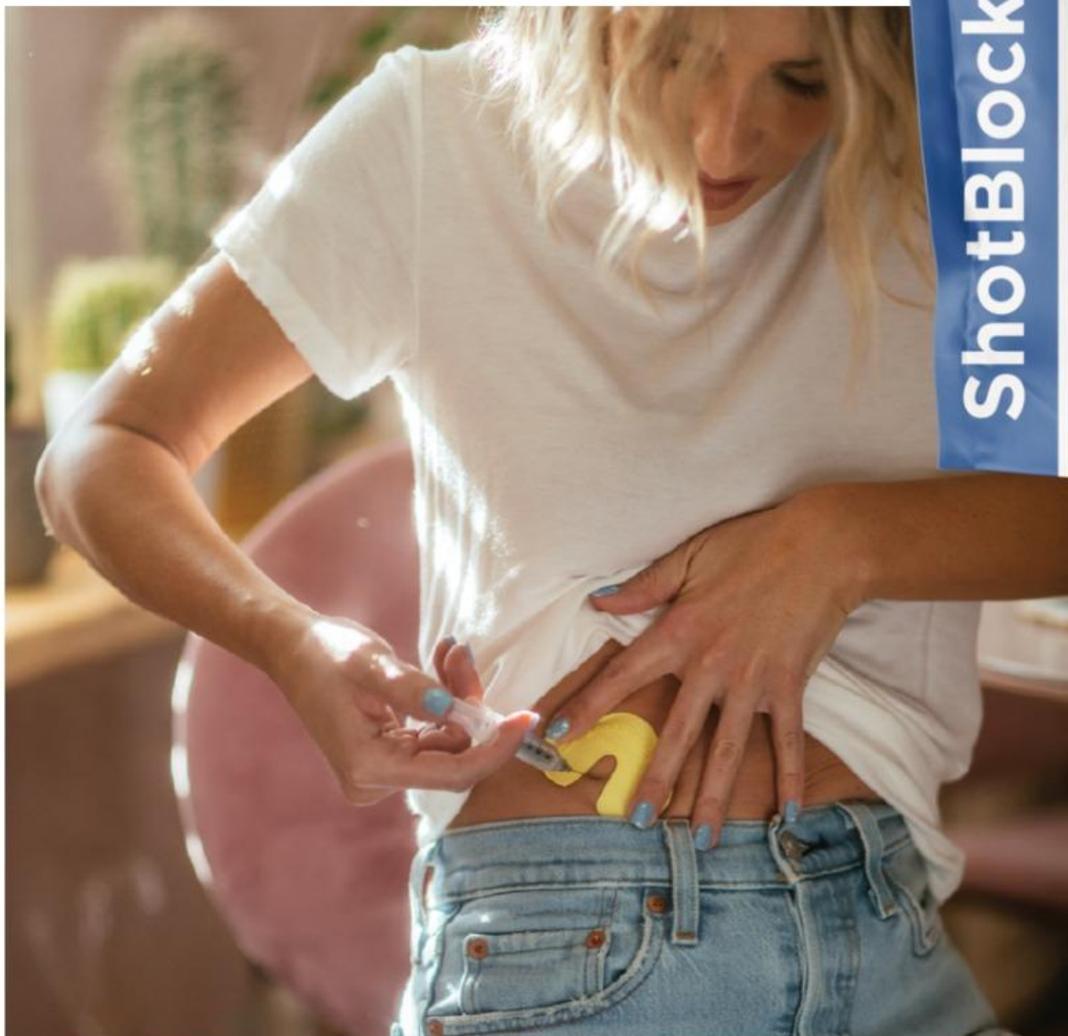

bionix

ShotBlocker®

¡Úselo para inyecciones como vacunas, insulina, gripe, alergias, fertilidad, hormonas y más!

Las inyecciones ya no tienen por qué doler



Diseñado por pediatras

Reduce instantáneamente el dolor y la ansiedad por las agujas e inyecciones

Simple, instantáneo, libre de fármacos y no invasivo.

1 ShotBlocker®

Reutilizable sólo por la misma persona. No compartir entre usuarios.

ShotBlocker®

Su desarrollo se basa en la Teoría de "Gate Control" para suprimir el dolor. Utiliza una serie de puntas romas especialmente diseñadas, presionando alrededor del sitio de inyección, para saturar momentáneamente las señales sensoriales.

¿Cómo se usa?

- 1 Seleccione el sitio de inyección.
- 2 Sostenga el ShotBlocker de modo que todas las puntas romas de contacto toquen la piel del paciente.
- 3 Presione el ShotBlocker FIRMEMENTE contra la piel.
- 4 Administre la inyección inmediatamente, de la manera habitual, a través del espacio central abierto del ShotBlocker.

No mueva ni retire el ShotBlocker hasta que se haya completado la inyección.



Diseñado para todo tipo de vacunas e inyecciones intramusculares y subcutáneas, en brazos, caderas, muslos, etc.

Úselo para inyecciones de:

- Insulina
- Inmunización
- Gripe
- Alergias
- Fertilidad
- Hormonas y más

FutureMed

Soluciones Médicas Avanzadas

www.futuremed.cl



FABRICANTE
Bionix LLC
1875 Indian Wood Ct.
Millsboro, Ohio, USA



MADE IN USA

RECYCLED

IMPORTADOR
FutureMed SpA
Av. Santa Clara 301,
Of. 4005
Huechuraba, Santiago
Chile



@FutureMedChile

futuremed.cl

+56 2 2752 1830



7 608304 3518 107

¿Cómo Funciona?

ShotBlocker® se basa en la Teoría de "Gate Control" para suprimir el dolor. Utiliza una serie de puntas romas especialmente diseñadas, presionando alrededor del sitio de inyección, para saturar momentáneamente las señales sensoriales.

¿Cómo Se Usa?



1. Seleccione el sitio de inyección



2. Sostenga el ShotBlocker® de modo que todas las puntas romas toquen la piel del paciente



3. Presione el ShotBlocker® FIRMEMENTE contra la piel



4. Administre la inyección enseguida, de la manera habitual, a través del espacio abierto del ShotBlocker®



bionix

¡Úselo para inyecciones como vacunas, insulina, gripe, alergias, fertilidad, hormonas y más!

ShotBlocker®

La
ti

bionix

¡Úselo para inyecciones como vacunas, insulina, gripe, alergias, fertilidad, hormonas y más!

ShotBlocker®

Las
ti

bionix

¡Úselo para inyecciones como vacunas, insulina, gripe, alergias, fertilidad, hormonas y más!

Las inyecciones ya no tienen por qué doler



Diseñado por pediatras

Reduce instantáneamente el dolor y la ansiedad por las agujas e inyecciones

Simple, instantáneo, libre de fármacos y no invasivo.

1 ShotBlocker®

